

MAQUET

MEDAP-GERÄTESCHIENEN UND ZUBEHÖR

SURGICAL WORKPLACES





HOCHWERTIGE GERÄTESCHIENEN MIT ZUBEHÖRPROGRAMM VEREINFACHEN DEN MEDIZINISCHEN PFLEGEALLTAG MAQUET – THE GOLD STANDARD



Intelligent aufeinander abgestimmt: In Situationen, wenn jeder Griff sitzen muss, ist es unabdingbar, dass der Arbeitsablauf hundertprozentig funktioniert. Passend für eine optimale medizinische Patientenversorgung hat MAQUET deshalb ein hochwertiges Schienensystem zur schnellen und übersichtlichen Aufnahme von medizinischen Geräten entwickelt. Zusammen mit dem passenden Zubehörprogramm wird es den modernen Anforderungen im gesamten klinischen wie außerklinischen Bereich mehr als gerecht.

Überzeugend in Form und Funktion setzen Geräteschienen und Zubehör von MAQUET seit Jahren weltweit erfolgreich neue Standards bei der Workflow-Optimierung in Kliniken und Praxen. Als qualitativ hochwertige Ausstattungslösung bieten sie eine perfekte Verbindung aus langlebigen, robusten Materialien, erstklassiger Verarbeitung, sicherer Handhabung und besonders einfacher Montage.

MAQUET – The Gold Standard.

IDEAL FÜR MEDIZINISCHE GERÄTE MEDAP-GERÄTESCHIENEN UND GERÄTEHALTER

Alles aus einer Hand: MEDAP-Geräteschienen nach DIN EN 12218 und das passende Zubehörprogramm ermöglichen eine schnelle, platzsparende und vor allem übersichtliche Aufnahme und Anordnung von medizinischen Geräten. Insgesamt stehen folgende Komponenten zur Auswahl:

- Geräteschienen 25 x 10 mm
- Gerätehalter in verschiedenen Ausführungen
- Infusionsflaschenhalter mit Spezialzubehör
- Gelenkarm mit Schlauchhalter
- Monitorträger und Ablageplatten
- Körbe und Halter aus Edelstahl
- Bettentrenner

Ganz nach Bedarf: MEDAP-Geräteschienen mit einem Schienenprofil von 25 x 10 mm sind in den Standardlängen 1 m, 2 m und 3 m erhältlich. Mit einer stabilen Verbindungsplatte können sie einfach und sicher miteinander verbunden und damit ideal verlängert werden. Darüber hinaus sind

MEDAP-Geräteschienen aber auch in individuellen Längen bis 4 m lieferbar – passend für eine maßgeschneiderte Ausstattungslösung.

Hochwertige Werkstoffe: MEDAP-Geräteschienen werden ausschließlich aus erstklassigem rostfreiem Edelstahl gefertigt. Die Hohlschiene hält dabei einer Belastung von 50 kg pro Bolzen stand, wobei der Bolzenabstand 50 cm beträgt. Damit ergibt sich eine Tragkraft von 100 kg pro Meter.

Besonders einfache Montage: MEDAP-Geräteschienen lassen sich schnell und ohne großen Aufwand horizontal an jeder Wand montieren, zumal alle örtlichen Gegebenheiten wie auch Wandsysteme berücksichtigt werden können. Spezielle zweiteilige, schwarze Abdeckkappen sorgen für eine besonders leichte, mühelose Montage der Hohlschiene, da sie erst nach der Befestigung der Geräteschienen an der Wand aufgesteckt werden. Auch der Potentialausgleichsanschluss lässt sich einfach und unkompliziert ausführen.

GERÄTESCHIENEN 25 X 10 MM

Standardmaße	Länge	Art.-Nr.
Geräteschiene	1 m	57 507 974
Geräteschiene	2 m	57 507 975
Geräteschiene	3 m	57 507 976

Sondermaße	Länge	Art.-Nr.
Geräteschiene / 2 Bolzen	0-0,99 m	57 520 572
Geräteschiene / 3 Bolzen	1,01-1,50 m	57 520 573
Geräteschiene / 4 Bolzen	1,51-1,99 m	57 520 574
Geräteschiene / 5 Bolzen	2,01-2,50 m	57 520 575
Geräteschiene / 6 Bolzen	2,51-2,99 m	57 520 576
Geräteschiene / 7 Bolzen	3,01-3,50 m	57 520 577
Geräteschiene / 8 Bolzen	3,51-4,00 m	57 520 519

Empfohlenes Zubehör	Länge	Art.-Nr.
Verbindungsplatte		57 507 985

Die Hohlschienen mit einem Schienenprofil von 25 x 10 mm sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt.





Erdungsklemmen zum einfachen Anschluss des Potentialausgleichs



Zweiteilige Abdeckkappen für eine mühelose Wandmontage



Endkappen zum Abschluss der Schienenenden sind im Lieferumfang enthalten.



Verbindungsplatte zur sicheren Verlängerung von Geräteschienen



Gerätehalter mit Schnellspannhebel – zur Verschraubung



Gerätehalter mit Feststellschraube – zur Verschraubung

Komplettpaket: MEDAP-Geräteschienen werden komplett mit Montageset, Erdungsklemmen, zweiteiligen Abdeckkappen und Endkappen geliefert. Wird eine Verlängerung gewünscht, müssen nur die Verbindungsplatten als Zubehör bestellt werden.

Fest im Griff: Bei Geräten ohne Geräteschienenhalter empfiehlt sich die Verwendung eines Gerätehalters mit Schnellspannhebel oder Feststellschraube. Zwei Senkbohrungen M5 im Abstand von 22 mm sorgen für eine zuverlässige Verschraubung der entsprechenden Geräte und eine sichere Befestigung an einer Geräteschiene 25 x 10 mm.

GERÄTEHALTER

Für Geräteschiene 25 x 10 mm	Art.-Nr.
Gerätehalter mit Schnellspannhebel	57 524 531
Gerätehalter mit Feststellschraube	57 524 532



MEDAP-Geräteschienen lassen sich problemlos wischdesinfizieren.

Die zweiteiligen Abdeckkappen werden erst nach der Montage aufgesteckt.



*Edelstahl-Infusionsflaschenhalter
mit variabler Teleskop-Infusions-
stange, 4-fach Hakenwelle und
Abtropfglas mit Halter.
Edelstahl-Befestigungsstange
1,4 m zur Aufnahme von Infusions-
und Spritzenpumpen.*

PERFEKT FÜR EINE PLATZSPARENDE PATIENTENVERSORGUNG INFUSIONSFLASCHENHALTER UND ZUBEHÖR

Flexible Ausstattungslösung: Wirtschaftlich und platzsparend präsentiert sich der neu konzipierte Infusionsflaschenhalter zur Aufnahme von Infusionsflaschen und -beuteln wie auch Infusions- und Spritzenpumpen. Mit der Teleskop-Infusionsstange aus Edelstahl, die von 1,15 m bis 2,20 m verstellbar ist, können alle geforderten Anwendungshöhen einfach und schnell bedient werden. Mit einem Durchmesser des Außenrohrs von 25 mm und einem Durchmesser des Innenrohrs von 18 mm wird die Teleskop-Infusionsstange an Geräteschienen mit einem passenden Geräteschienenhalter mit 25 mm Bohrung befestigt. Der komplette Edelstahl-Infusionsflaschenhalter verfügt über die Teleskop-Infusionsstange, eine 4-fach Hakenwelle und ein Abtropfglas mit Halter.

Bewährter Partner: An der 1,4 m langen Befestigungsstange aus Edelstahl-Rundrohr mit Endkappen aus Kunststoff können ebenfalls Infusions- und Spritzenpumpen montiert werden. Die Befestigung erfolgt mit einem passenden Geräteschienenhalter mit 25 mm Bohrung.

Stabil und robust: Der Geräteschienenhalter eignet sich hervorragend zur einfachen Montage von Befestigungsstangen mit 25 mm Außenrohrdurchmesser an Geräteschienen 25 x 10 mm.

Hier stimmt jedes Detail: Passend für jede Anwendung erlaubt der variable Geräteschienenhalter die flexible Montage von Befestigungsstangen mit 25 mm Außenrohrdurchmesser an Geräteschienen – und zwar in einem Bereich von 10-20 cm. Damit kann der Abstand zwischen zwei verschiedenen tiefen Geräteschienen, die z.B. an der Wand und auf einem Versorgungskanal montiert wurden, optimal ausgeglichen werden.



Robuster Geräteschienenhalter zur Aufnahme von Befestigungsstangen



Variabler Geräteschienenhalter – ideal zum Ausgleich von verschieden tiefen Geräteschienen

INFUSIONSFLASCHENHALTER UND ZUBEHÖR

Für Geräteschiene 25 x 10 mm	Art.-Nr.
Infusionsflaschenhalter	57 524 535
Befestigungsstange	57 520 259
Geräteschienenhalter	57 524 536
Geräteschienenhalter / variabel	57 524 537

ABLAGE MIT SYSTEM ZUBEHÖR FÜR GERÄTESCHIENEN

Sichere Handhabung: Das gesamte Geräteschienen-zubehör von MAQUET ist so konzipiert, dass es mit nur einem oder wenigen Handgriffen schnell und äußerst zuverlässig an einer Geräteschiene angebracht werden kann.

Zur Atemgasanfeuchtung bei der Inhalation: Der variable Gelenkarm verfügt über insgesamt zwei Gelenke und drei Kunststoffhalter für Schläuche mit einem Durchmesser von 22 mm. MAQUET bietet auch komplette Inhalationseinrichtungen für Intensivanfeuchter an.

Vielseitig im Einsatz: FINA Schienenklammern aus Metall und Kunststoff eignen sich zur Aufnahme von Produkten mit Geräteträgeranschluss nach DIN EN 12218. Sie passen an alle üblichen Geräteschienen.



Gelenkarm mit drei Kunststoffhaltern für Schläuche 22 mm



FINA Schienenklammer aus Metall



FINA Schienenklammer aus Kunststoff



Halter mit Doppelhaken z.B. für gerollte Anschlusschläuche



Flexibler Schlauchhalter für verschiedene Absaugschläuche

GERÄTESCHIENENZUBEHÖR

Für Geräteschiene 25 x 10 mm	Abmessung	Art.-Nr.
Gelenkarm		57 524 544
Halter mit Doppelhaken		57 508 014
Schlauchhalter		57 508 021
Abfallbeutelhalter	190 x 270 mm	57 524 534

Für alle üblichen Geräteschienen	Abmessung	Art.-Nr.
FINA Schienenklammer / Metall		57 522 048
FINA Schienenklammer / Kunststoff		57 522 540
Journalhalter	250 x 140 x 260 mm	57 524 540



Abfallbeutelhalter mit Haltering für einfachen Abfallbeutelwechsel



Edelstahl-Journalhalter für medizinische Unterlagen



Kleiner Edelstahl-Katheterhalter



Großer Edelstahl-Katheterhalter – auch für Fahrgestell

Darauf ist Verlass: Dank ihrer hohen Tragkraft und soliden Bauweise garantieren der Monitorträger mit Schublade wie auch die Ablageplatte eine zuverlässige und sichere Aufnahme von medizinischen Überwachungsgeräten an Geräteschienen. Aus Sicherheitsgründen sind sie mit Gummischutzecken als Kantenschutz ausgestattet.

Besonders belastbar: Mit einer Tragkraft von 40 kg präsentiert sich der Monitorträger als eine besonders belastungsfähige Kombination aus Edelstahl-Trägerplatte und pulverbeschichteter, weißer Schublade mit Vollauszug. Zwei Wandstützen mit Stellschrauben sorgen dabei in jeder Position für einen stabilen Halt.

Immer zur Hand: Im Handschuhhalter aus Edelstahl finden alle üblichen Verpackungseinheiten von Einweghandschuhen ihren Platz.



Kleiner Edelstahl-Ablagekorb




Großer Edelstahl-Ablagekorb



Stabiler Monitorträger mit Schublade – 40 kg Tragkraft



Edelstahl-Ablageplatte mit 20 kg Tragkraft

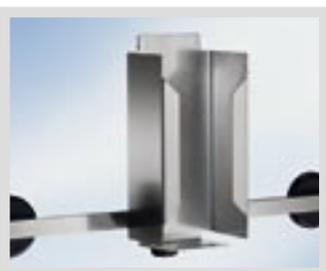

Edelstahl-Handschuhhalter



Schwenkbare Edelstahl-Ablageschale

GERÄTESCHIENENZUBEHÖR

Für Geräteschiene 25 x 10 mm	Abmessung	Art.-Nr.
Monitorträger mit Schublade	540 x 360 mm	57 524 533
Ablageplatte	255 x 255 mm	57 507 987
Handschuhhalter	135 x 140 x 225 mm	57 524 539
Ablageschale	Durchmesser 20 cm	57 524 538

Für alle üblichen Geräteschienen	Abmessung	Art.-Nr.
Katheterhalter / klein	90 x 90 x 350 mm	57 505 157
Katheterhalter / groß	150 x 100 x 480 mm	57 508 002
Ablagekorb / klein	170 x 130 x 85 mm	57 508 012
Ablagekorb / groß	470 x 180 x 150 mm	57 508 022


VORHANG AUF FÜR EIN MEHR AN DISKRETION BETTENTRENNER FÜR GERÄTESCHIENE UND WANDMONTAGE



Schwenkbarer Bettentrenner zur Befestigung an allen üblichen Geräteschienen



Schwenkbarer Bettentrenner zur Wandmontage

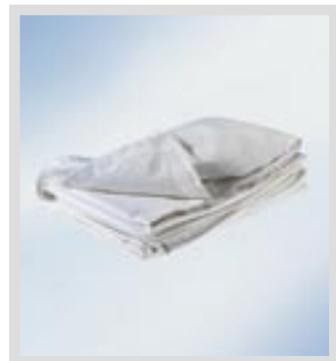

Weißer Vorhang aus kochfestem Leinen



Weißer Vorhangringe und -klammern werden bei jedem Bettentrenner mitgeliefert.

Schneller Schutz der Privatsphäre: Immer wenn bei der medizinischen Patientenversorgung ein Stück mehr an Diskretion angebracht ist, hat sich der ausziehbare Bettentrenner als äußerst praxisorientierte Lösung bewährt – in der Klinik ebenso wie im außerklinischen Umfeld. Insgesamt stehen zwei Modelle zur Auswahl, die komplett mit den passenden weißen Vorhangringen und Vorhangklammern geliefert werden.

Bettentrenner Geräteschiene: Dieses Modell kann an allen üblichen Geräteschienen befestigt werden. Zur Stabilisierung ist es mit einer Wandabstützung ausgestattet.

Bettentrenner Wand: Hier erfolgt die Montage des Bettentrenners mit Hilfe einer ca. 150 x 150 mm großen Wandmontageplatte direkt an der Wand.

Für ein Maximum an Flexibilität: Beide Bettentrenner zeichnen sich durch einen handlichen Teleskopausleger aus, der sich leicht bewegen und bis 150 cm ausziehen lässt. Darüber hinaus ist er auch um 180 Grad horizontal schwenkbar.

Praktischer Sichtschutz: Der hochwertige Vorhang ist aus weißem, kochfestem Leinen gefertigt. Er ist 110 cm hoch und 190 cm lang.

BETTENTRENNER

Produkt	Abmessung	Art.-Nr.
Bettentrenner / Geräteschiene		57 524 541
Bettentrenner / Wand		57 524 542
Vorhang	1,90 x 1,10 m	57 501 631

Ersatzteile	Einheit	Art.-Nr.
Vorhangringe weiß und Klammern	je 15 Stück	57 524 543



Praktisches Duo auf engstem Raum: Der schwenkbare Bettentrenner mit weißem Vorhang und der Abfallbeutelhalter für alle handelsüblichen Abfallbeutel lassen sich jederzeit einfach und schnell an der Geräteschiene befestigen.

Subsidiaries

Deutschland:

MAQUET Vertrieb und Service
Deutschland GmbH
Kehler Straße 31
D-76437 Rastatt, Germany
Telefon: +49 (0) 1803 212 133
Fax: +49 (0) 1803 212 177
Service-Hotline: +49 (0) 1803 212 144
info.vertrieb@maquet.de
www.maquet.de

Österreich:

MAQUET Medizintechnik
Vertrieb und Service GmbH
IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69 E 5
A-2355 Wiener Neudorf, Austria
Telefon: +43 (0) 2236 677 393-0
Fax: +43 (0) 2236 677 393-77
Service-Hotline: +43 (0) 2236 677 393-18
info-at@maquet.at
www.maquet.at

Schweiz:

MAQUET AG
Wilerstrasse 75
CH-9200 Gossau, Switzerland
Telefon: +41 (0) 71 335 0303
Fax: +41 (0) 71 335 0313
Service-Hotline: +41 (0) 71 335 0303
info@maquet.ch
www.maquet.ch

MAQUET GmbH & Co. KG
Kehler Straße 31
D-76437 Rastatt, Germany
Phone: +49 (0) 7222 932-0
Fax: +49 (0) 7222 932-571
Service-Hotline: +49 (0) 7222 932-745
info.sales@maquet.de
www.maquet.com

GETINGE

Die GETINGE Gruppe zählt weltweit zu den führenden Anbietern im Bereich der Gesundheitsversorgung. Die medizintechnischen Produkte der Unternehmensgruppe tragen entscheidend zur Qualitätssteigerung und Kostensenkung im Gesundheitswesen bei. Drei Marken repräsentieren die zukunftsweisenden Technologien und Dienstleistungen der GETINGE Gruppe: ARJO für Patientenhgiene, Patientenmobilität und Wundversorgung; GETINGE für Sterilisation, Desinfektion und Dokumentation im Gesundheitswesen sowie in Forschungseinrichtungen; MAQUET für Arbeitsplätze im OP und in der Intensivpflege.